

Rock 2 elektromos bőrkeményedés eltávolító – Használati útmutató

Modell: Rock 2 • Verzió: 1.0 • Kiadás dátuma: 2026-01-14


Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. [Rendeltetésszerű használat és áttekintés](#)
2. [Csomag tartalma](#)
3. [Biztonsági figyelmeztetések](#)
4. [Kezelőszervek és részegységek](#)
5. [Összeszerelés / telepítés](#)
6. [Üzembe helyezés](#)
7. [Használat lépései](#)
8. [Tisztítás és karbantartás](#)
9. [Hibaelhárítás](#)
10. [Műszaki adatok](#)
11. [Gyártó és importőr adatai](#)
12. [Megfelelőségi információk \(CE/DoC\)](#)
13. [Hulladékkezelés és környezetvédelem](#)
14. [Jótállás és szerviz](#)
15. [Forgalmazó és szerviz \(GearUp Kft.\)](#)

Rendeltetésszerű használat és áttekintés

A Rock 2 elektromos bőrkeményedés eltávolító egy hordozható készülék, amelyet kizárólag a lábfejen kialakuló bőrkeményedések, vastag, kemény szarurétegek kíméletes eltávolítására terveztek. Ne használja a készüléket normál bőrfelületen, se hegeken vagy sérült bőrön. A készüléket mindig száraz, tiszta bőrön alkalmazza, a legjobb eredmény érdekében előzőleg mossa meg és törölje szárazra a kezelni kívánt területet.

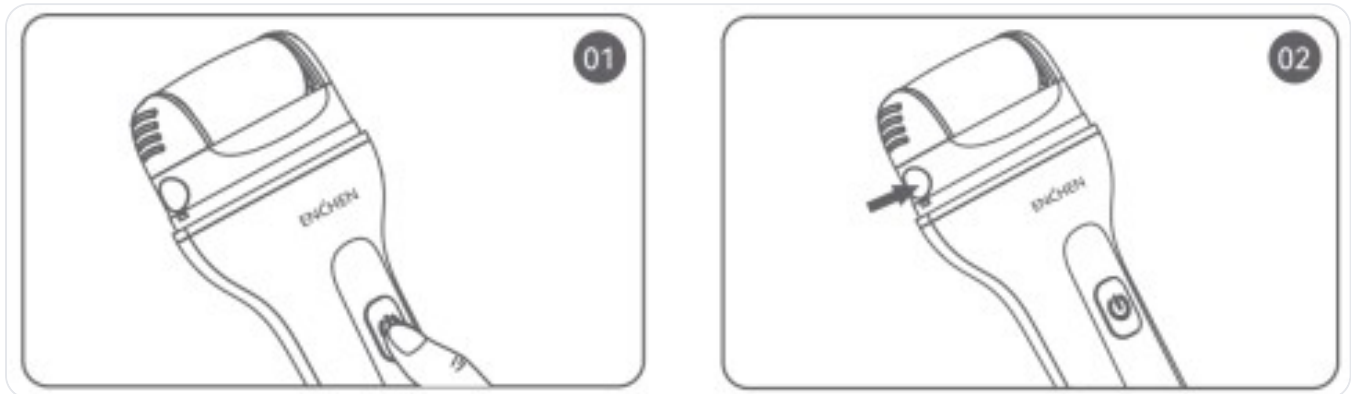

1. ábra – A készülék bekapcsolása és gombok elhelyezése

Csomag tartalma

- 1 × Rock 2 elektromos bőrkeményedés eltávolító készülék
- 1 × Védőkupak
- 1 × Csiszoló görgőfej (felszerelve)
- 1 × Tisztítókefe
- 1 × USB Type-C töltőkábel
- 1 × Használati útmutató

Biztonsági figyelmeztetések

Veszély!

- A készüléket gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják. A termék nem játék.
- Csak a láb bőrkeményedéseinek kezelésére alkalmas. Ne használja normál bőrön, se hegeken vagy sérült bőrfelületen.
- Ne merítse vízbe a készüléket, ne töltsen nedves környezetben, és használat után tartsa szárazon.
- A beépített akkumulátort soha ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérsékletnek. Ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket.

- Ne ejtse le és ne ütögesse a készüléket. Sérülés esetén ne használja tovább.

Figyelem!

- Minden használat után helyezze vissza a védőkupakot, és rendszeresen cserélje a görgőfejet a higiénia és a hatékonyság érdekében.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, töltsen fel legalább havi egy alkalommal, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
- Használat közben ne nyomja túl erősen a készüléket a bőrre; ha túl nagy nyomást fejt ki, a készülék leállhat.
- Ha bármilyen bőrprobléma miatt kezelést kap, konzultáljon orvosával a készülék használata előtt. Irritáció esetén függesztse fel a használatot és forduljon szakemberhez.
- Tartsa be az ajánlott üzemi és tárolási hőmérsékletet (0–40 °C).

Megjegyzés

- A görgőfej élettartama korlátozott; cserélje ki rendszeresen a hatékony működés érdekében.
- Tisztítás után gondoskodjon róla, hogy a készülék és a görgőfej teljesen megszáradjon, mielőtt újra összeszereli és használja.
- A termék kb. 210 perc vezeték nélküli használatot biztosít egy 2,5 órás töltés után.
- Az eszköz két sebességfokozattal rendelkezik (normál és turbó), amelyek közötti váltáshoz röviden nyomja meg a bekapcsológombot.




csap alatt Akkumulátor
óvatosan

2. ábra – Tilos a készüléket víz alá meríteni

Kezelőszervek és részegységek

1. **Védőkupak:** műanyag sapka, amely védi a görgőfejet használaton kívül.
2. **Csiszoló görgőfej:** nagy teljesítményű csiszolóhenger a bőrkeményedések eltávolításához.
3. **Oldalsó gomb:** a görgőfej cseréjéhez nyomja meg, majd húzza ki a fejet.
4. **Be-/kikapcsoló gomb:** rövid nyomásra bekapcsol, második rövid nyomásra turbó mód, hosszan (3 s) nyomva kikapcsol.
5. **Jelzőfény:** vörös fény töltés közben, zöld fény teljesen feltöltött állapotban.
6. **Tisztítókefe:** kis sörtékkel ellátott kefe a görgőfej és a készüléktest tisztításához.
7. **Töltőcsatlakozó:** a készülék alján található Type-C port az USB-kábellel történő töltéshez.
8. **Type-C töltőkábel:** a készülékhez mellékelt USB-kabel, mely a 5 V/1 A adapterhez csatlakoztatható.

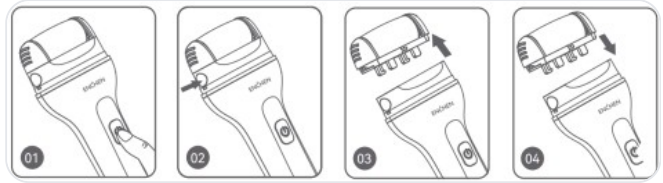

3. ábra – Görgőfej cseréje

Összeszerelés / telepítés


1. Távolítsa el a védőkupakot a készülékről.
2. Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket: csatlakoztassa a mellékelt Type-C kábelt a készülék alján lévő csatlakozóhoz, majd a 5 V/1 A-es adaptert hálózati aljzatba. A vörös jelzőfény a töltés ideje alatt világít, a zöld fény pedig folyamatosan ég, ha a készülék feltöltött.
3. Töltés közben a készüléket ne használja, és ne helyezze nedves környezetbe. A teljes töltési idő kb. 2,5 óra.

Üzembe helyezés

1. A töltés befejezése után húzza ki a kábelt és helyezze vissza a védőkupakot.
2. Tárolja a készüléket száraz, hűvös helyen. Hosszabb tárolás esetén (hosszabb mint 6 hónap) töltse fel az akkumulátort, hogy elkerülje a túlzott lemerülést.
3. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a görgőfej szorosan rögzített-e a készülékhez.

Használat lépései

1. **Bekapcsolás:** vegye le a védőkupakot, majd röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A készülék bekapcsol; még egy rövid nyomással turbó módba kapcsolhat. A turbó mód nagyobb fordulatszámot biztosít vastagabb bőrkeményedésekhez.
2. **Használat:** finoman csúsztassa a csiszoló görgőt előre-hátra, illetve balra-jobbra a száraz, megkeményedett bőrfelületen. Ne nyomja túl erősen a készüléket; 2–3 másodpercig kezelje a területet, majd ellenőrizze az eredményt. Szükség esetén ismételje meg. Javasolt a láb előzetes lemosása és alapos szárítása a hatékonyság növelése érdekében.
3. **Kikapcsolás:** nyomja le hosszan (kb. 3 másodpercig) a bekapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához, majd helyezze vissza a védőkupakot. Ez megóvjá a görgőfejet sérülésektől.

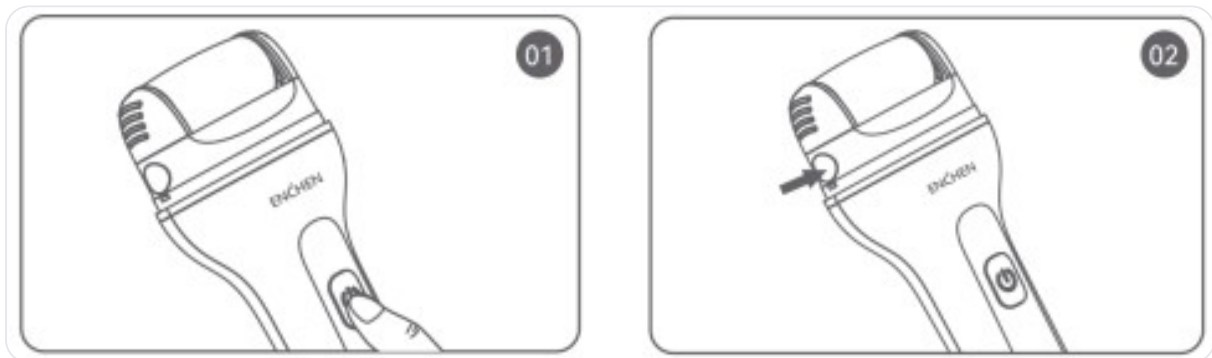


4. ábra – Bekapcsolás és turbó mód használat


Tisztítás és karbantartás

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a töltőkábelt.
2. A görgőfej eltávolításához nyomja meg az oldalsó gombot, majd húzza ki a fejet. Cserélje le egy új görgőfejre úgy, hogy visszahelyezi és a „kattanásig” benyomja.
3. A görgőfej és a készülék fejének belsejét tisztítsa meg a mellékelt kefével. Távolítsa el a bőrmaradványokat és port.

4. A görgőfejet folyó víz alatt öblítse le, majd hagyja megszáradni. A készülék testét ne merítse víz alá; törölje száraz, nedvesedéstől mentes ruhával.
5. Ne tárolja a készüléket nedves helyen, és ne töltsé víz közelében. A hosszabb élettartam érdekében tisztítás után a készülék és a csatlakozók legyenek szárazak.

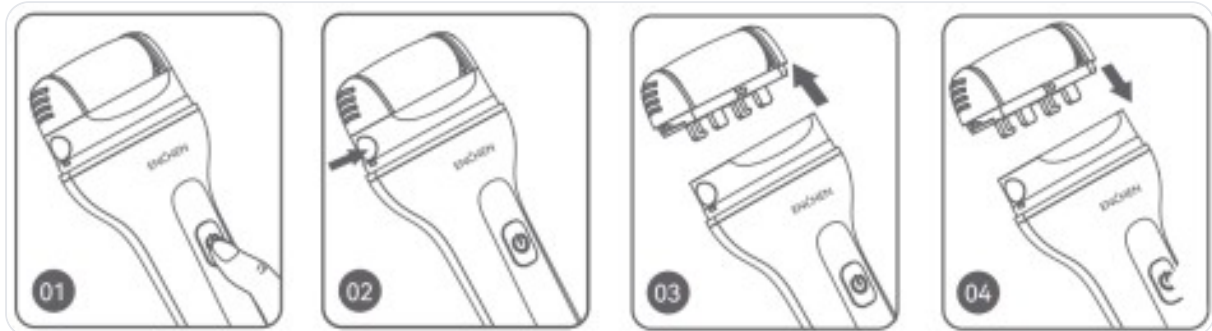

5. ábra – Görgőfej eltávolítása és cseréje

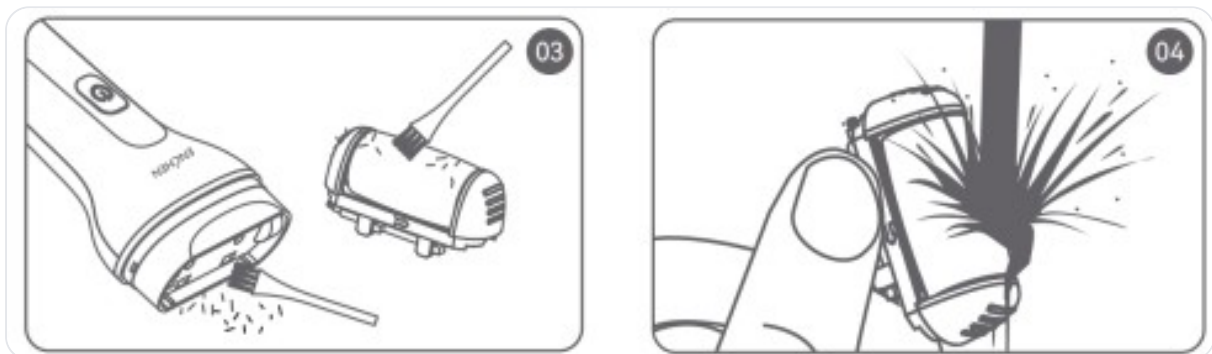

4. ábra – Tisztítási és karbantartási lépések

Hibaelhárítás

1. A készülék nem kapcsol be

- *Ok:* az akkumulátor lemerült.
- *Megoldás:* töltsé fel teljesen a készüléket, majd próbálja újra.

2. A görgőfej nem forog

- *Ok:* a görgőfej nincs megfelelően rögzítve.
- *Megoldás:* kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja be az oldalsó gombot és szerelje vissza helyesen a görgőfejet.

Műszaki adatok

Termék neve	Elektromos bőrkeményedés eltávolító
Modell	Rock 2
Bemenet	5 V= 1 A
Névleges teljesítmény	5 W
Akkumulátor	600 mAh / 3,7 V Li-ion
Töltési idő	2,5 óra
Üzemidő	kb. 210 perc
Töltőcsatlakozó	USB Type-C
Szín	Fémes
Sebességfokozatok	2 (normál / turbó)

Gyártó és importőr adatai

Gyártó: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd. • Room 103, 3rd Building, Donglan Road 320, Minhang District, Shanghai 200245, Kína • export@enchen.cn

Meghatalmazott európai képviselő: OVICX TECHNOLOGY GmbH • Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Németország • export@enchen.cn

Importőr: GearUp Kft. • Adószám: 32226351-2-09 • Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15. • E-mail: hello@gearup.hu

Megfelelőségi információk (CE/DoC)

Ez a termék megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek és rendeleteinek, többek között a Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 2014/35/EU irányelvnek, az Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelvnek és a veszélyes anyagok használatát korlátozó (RoHS) 2011/65/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a gyártótól kérhető; a dokumentum tartalmazza a terméknek a harmonizált szabványoknak való megfelelését.

- EN 60335-1: Háztartási és hasonló célú készülékek biztonsági követelményei
- EN 62311: Készülékek elektromágneses térerősségének általános értékelése

- EN 55014-1/-2: Háztartási készülékek elektromágneses zavartűrése és zavarkibocsátása
- EN 50636-2-100: Különleges követelmények bőrkeményedés eltávolítók számára

Hulladékkezelés és környezetvédelem

A terméket és tartozékait élettartamuk végén ne dobja a háztartási hulladékba. A készülék újrahasznosítható komponenseket tartalmaz; a WEEE irányelv szerint a hulladék elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontjain kell leadni. A megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezet védelméhez és megelőzi a potenciális egészségügyi kockázatokat.

Jótállás és szerviz

A jótállás a vásárlás időpontjától kezdődik és a jogszabályoknak megfelelően érvényes. A jótállás kizárólag a gyártási hibákra vonatkozik; a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre nem. A jótállás érvényesítéséhez őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot, és problémája esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy a hivatalos szervizhez. A beépített lítium-ion akkumulátor cseréjét vagy eltávolítását kizárólag szakember végezheti; leselejtezés előtt a készülékből távolítsa el az akkumulátort és kezelje veszélyes hulladékként.

Forgalmazó és szerviz (GearUp Kft.)

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu

© 2026 GearUp Kft. Minden jog fenntartva. CE és egyéb jelölések a terméken vagy annak csomagolásán találhatóak.