


KONKA masszázspisztoly 10 órás üzemidővel, 8 masszázsféjjel és 6 fokozattal - fekete


használati útmutató

Cikkszám: KO-A1-8D

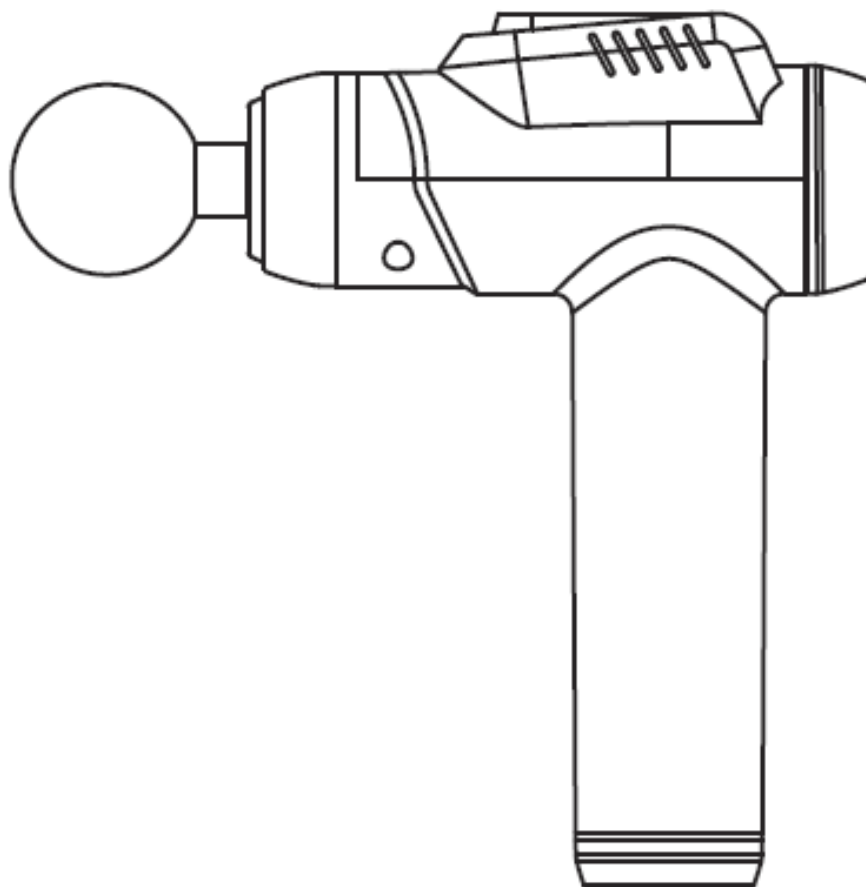

Termék bemutatása

A mélyizom fascia masszázspisztoly egy vibrációs masszázseszköz, amely nagy nyomatékkel és több fokozattal rendelkezik. Hatékonyan csökkenti az intenzív edzés utáni tejsav felhalmozódás okozta izomlázat, valamint enyhíti a hosszú ideig ülő munkát végző dolgozók és fitnessrajongók izomdiszkomfortját.

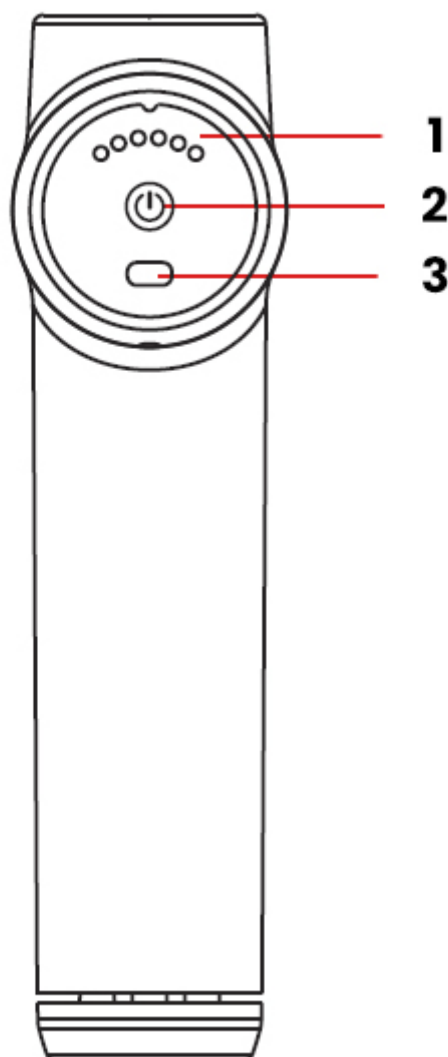

1. LED jelzőfény
2. Be- kikapcsoló gomb

3. Type-C töltési port

Funkciók

1. **Bekapcsolás:** Nyomja meg a bekapcsológombot, ekkor az indikátor fény világít, a készülék elkezd működni, és a bekapcsolási folyamat befejeződik.
2. **Fokozatváltás:** Bekapcsolás után röviden nyomja meg a bekapcsológombot a fokozat növeléséhez, így a készülék erőssége fokozatosan növekszik az 1-es fokozattól a 6-os fokozatig.
3. **Kikapcsolás:** Tartsa lenyomva a Be- kikapcsológombot a kikapcsoláshoz, ekkor az indikátor fény kialszik.
4. A készülék 15 perc működés után **automatikusan kikapcsol**. Ha újra használni szeretné, kérjük, nyomja meg ismét a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz.

Specifikáció

Töltési feszültség	5V
Névleges feszültség	7.4V
Töltési áram	2A
Névleges teljesítmény	18W
Maximális hatótávolság	15 méter (akadályok nélkül)
Akkumulátor kapacitás	1200mAh
Töltési idő	~3-4 óra

Akkumulátor használat

1. Amikor az akkumulátor lemerült, körülbelül 3 órát kell tölteni a teljes feltöltéshez. A készülék egyetlen feltöltéssel való működési ideje az akkumulátor elhasználódottságától és a használati körülményektől függően 0,5-3 óra lehet.
2. Töltés közben kérjük, használja a készülékhez mellékelte speciális töltőkábelt, és 5V-os, a nemzeti szabványokat nem meghaladó 15W-os adaptert.
3. Amikor a masszázspisztolyt tölti, a termék paneljén található piros töltésjelző lámpa világít, és a teljes feltöltés után kialszik.

Masszázspisztoly használata

Kérjük, használat előtt helyezze be valamelyik mellékelte masszázsfőjet a készülék elülső nyílásába.

A készülék mélyreható vibrációja gyorsan enyhítheti a fájdalmat, bursitist, izomgörcsöket, neuralgiát és egyéb, ízületi rándulás okozta mozgásszervi betegségeket. Szinte minden lágyrész betegség összefügg a traumával, az izom túlterhelésével vagy helytelen testtartással. Ezeknek a betegségeknek a többsége arci hegyszövetet érint, amely a készülékkel kezelhető. A készülék használata során kerülni kell a túlzott nyomást és a hosszú távú fizikoterápiát. Érzékeny területeket, például a fejet, az arcot és a nyaki gerincet szintén kerülni kell. Ha gyulladás, duzzanat vagy fájdalom fokozódik, azonnal abba kell hagyni a készülék használatát.

A jelenlegi kutatások a vibrációs edzés hatását vizsgálják specifikus orvosi betegségek esetén. Ez valószínűleg csökkenti a fent említett ellenjavallatok típusait. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben a vibrációs edzés és a fizikoterápia kombinációja is javasolt fizikoterápiás módszer. Ezt csak orvos, szakember vagy gyógytornász tanácsára vagy jelenlétében szabad végezni.

Javallatok

- Izomzúzódás, rándulás és húzódás okozta fájdalom és görcs enyhítése
- Segíti az ödémás folyadék áramlását a duzzadt területen
- Lazítja és vékonyítja a megvastagodott kötőszövetet és fasciát
- Csökkenti az izomban felhalmozódott tejsavat
- Növeli az ízületi mozgástartományt
- Enyhíti az izomfáradtságot

NEM JAVASOLT A HASZNÁLAT az alábbi esetekben:

- Aneurizmák, vérzés, vérhígítók használata esetében
- Szívbetegség, pacemaker vagy defibrillátor esetén
- Terhesség, rák esetén
- A készüléket nem szabad használni 3 hüvelyken belül belső rögzítés esetén 90 napon belül
- Érzékeny területek: fej, arc, nyaki gerinc esetén
- Kevésbé izommal fedett területek: sípcsont, lábfej háti része, kézhát és hasonló területek esetén

Karbantartás


1. Törölje le a készülék felületét enyhén nedves törlőkendővel, majd szárítsa meg puha száraz ruhával.
2. Hosszú távú tárolás vagy utazás esetén helyezze a terméket az eredeti csomagolásába és tartsa száraz helyen.
3. Kérjük, használja a termékhez mellékelt USB kábelt és az 5V-os adaptert a készülék töltéséhez.
4. Ne használjon sérült burkolatú vagy helytelen feszültségű töltőt (adaptert) a készülék töltéséhez.
5. Ne érintse meg nedves kézzel a töltőkábelt és az adaptert, és ne húzza a töltőkábelt a csatlakozó vagy az adapter eltávolításához.
6. Ne érintse meg a terméket vagy a töltőt (adaptert) nedves kézzel, hogy elkerülje a készülék rövidzárlatát, meghibásodását vagy áramütést.
7. Hagyja abba az adapter használatát, ha az esőnek, folyadéknak vagy súlyos nedvességnek van kitéve.
8. Az alábbi személyek: beültetett szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek, szívbeteg, háthúzódással rendelkező betegek, terhes nők vagy frissen szültek, töréses betegek, csontritkulásos, ízületi betegséggel küzdő betegek, rosszindulatú daganatos betegek, bőrsérüléssel vagy ekcémával küzdő személyek nem használhatják a készüléket. Ha nem biztos a használatban, kérjük, konzultáljon orvosával.
9. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy fűtőberendezések közelébe, mint például napfény, hő stb. A túlmelegedett akkumulátorok, például melegítők, mikrohullámú sütők, sütők vagy vízmelegítők robbanást okozhatnak.
10. Ne szerelje szét vagy alakítsa át az akkumulátorokat, ne helyezzen beléjük idegen anyagokat, és ne merítse vízbe vagy más folyadékokba, hogy elkerülje a szivárgást, túlmelegedést, tüzet vagy robbanást.
11. A készülékek leselejtezése előtt az akkumulátorokat el kell távolítani a készülékekből.
12. Az akkumulátorok eltávolításakor a készülékeket ki kell kapcsolni.
13. Az akkumulátorokat biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Fontos figyelmeztetések

- Ez a termék **nem orvosi célokra készült**, csak személyes masszázst funkciókat biztosít.
- **Gyermekek és felügyelet nélküli személyek:** Ne engedje, hogy gyermekek vagy önállóan nem cselekvőképes személyek használják a készüléket. Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
- **Bőrfelület:** Ne használja nedves, piszkos bőrfelületen. Ruhán keresztül is használható, enyhén nyomva és mozgatva a bőrön, körülbelül 10 másodpercig minden területen.
- **Kemény vagy csonttal borított területek:** Ne használja a fej tetején vagy más kemény, csonttal borított területeken. Csak a test puha szövetein használja, ha nincs fájdalom vagy kellemetlenség.
- **Zúzódások és fájdalom:** Ne használja, ha a masszírozott területen zúzódás, fájdalom vagy kellemetlenség tapasztalható.
- **Stabilitás:** Ne álljon vagy üljön közvetlenül a termékre, mert az balesetet okozhat.
- **Túlmelegedés:** A túlzott használat a termék túlmelegedését és élettartamának csökkenését okozhatja. Ismételt használat esetén hagyja a terméket lehűlni egy ideig használat előtt.
- **Párás környezet:** Ne használja párás környezetben, például fürdőszobában, és ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékokba, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy áramütést.
- **Hőforrások:** Ne helyezze a terméket kályha közelébe vagy közvetlen napfényre.
- **Villámlás:** Ne használja vihar idején.
- **Idegen tárgyak:** Ne helyezzen vagy dobjon tárgyakat a termék nyílásaiba.
- **Lefedés:** Ne fedje le a masszírozót használat közben, hogy elkerülje a motor túlmelegedését és meghibásodását.
- **Mozgó részek:** Ne engedje, hogy ujjak, haj vagy a test más részei közel kerüljenek a vibráló fej tengelyéhez és hátuljához, mert beakadhatnak.

Akkumulátor eltávolítása

1. Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt azt kidobná.
2. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell kapcsolni.
3. Az akkumulátorokat biztonságosan kell ártalmatlanítani.

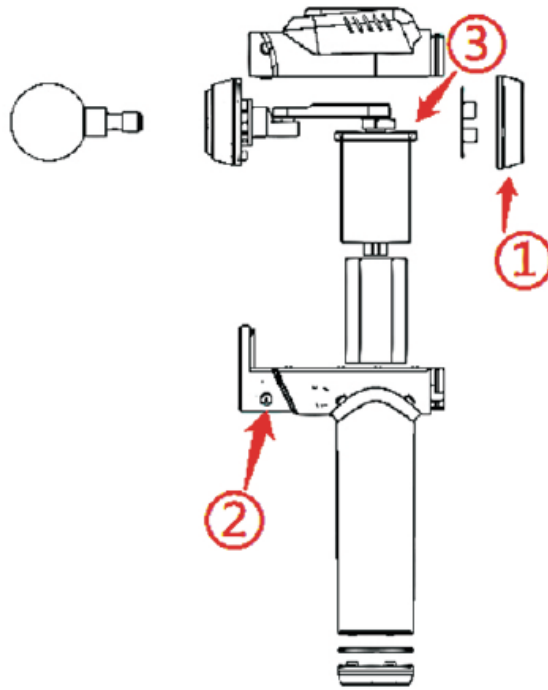

- Először használjon csavarhúzóval az 1-es és 2-es számú csavarok eltávolításához a képen látható helyeken. Nyissa ki a készülék hátlapját és felső burkolatát.
- Ezután csavarhúzóval távolítsa el a 3-as számú csavart, és vegye ki a motort.
- Keresse meg az akkumulátor csatlakozóját az alaplapon a hátlapon, húzza ki a csatlakozót, majd vegye ki az akkumulátort a készülékből, és ártalmatlanítsa biztonságosan a vonatkozó szabályozások szerint.

Garancia

Minden ember által okozott károsodás, mint például a készülék saját kezű szétszerelése, nem rendeltetésszerű használat stb., nem tartozik a garancia hatálya alá.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.gearup.hu
- E-mail címünk: hello@gearup.hu

Megfelelőségi Tanúsítvány

Termék neve: KONKA masszázspisztoly

Végrehajtási szabvány: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008