




Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FAS2: elektromos masszázspisztoly, 6 db masszázsféjjel

Cikkszám:
BW-FAS2

Made in China

A termék leírása

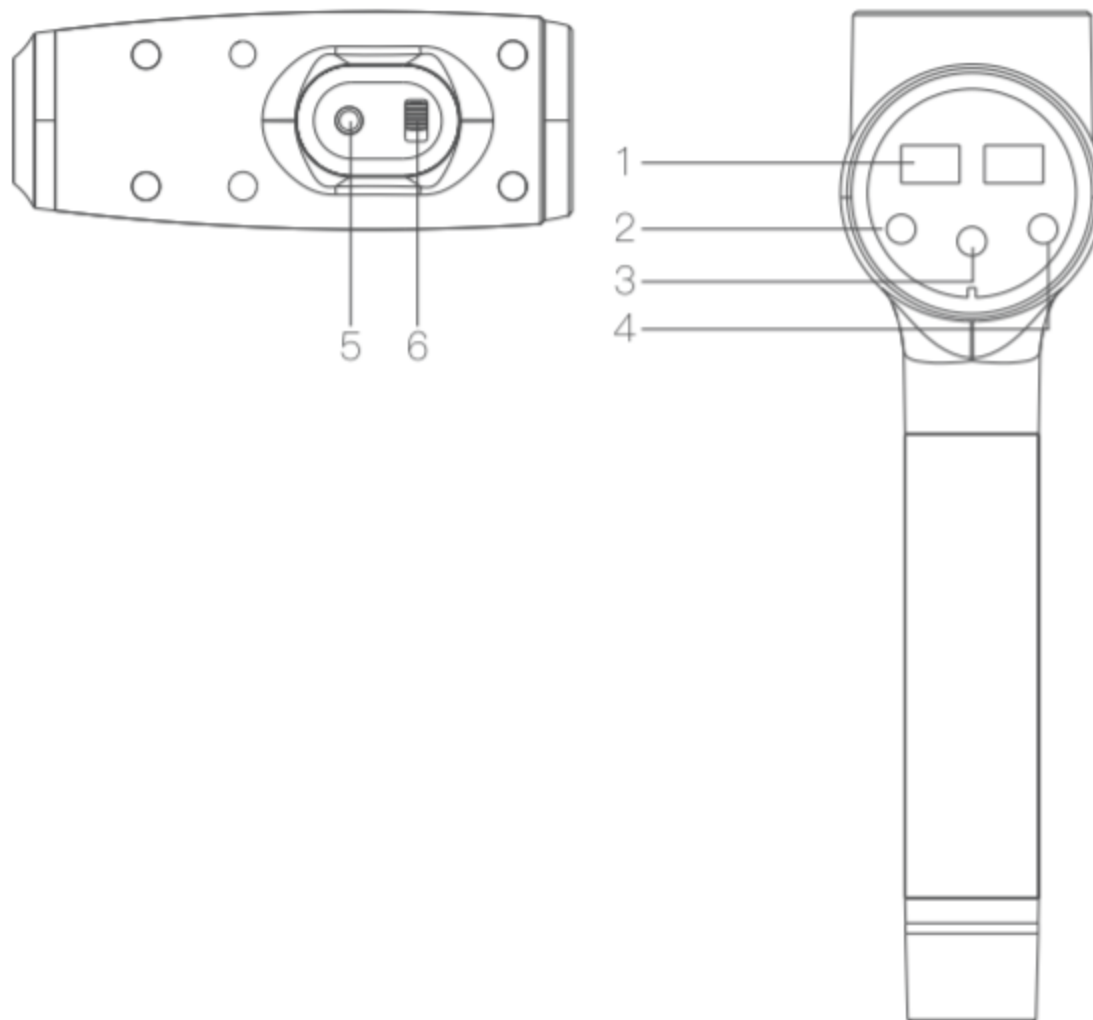

1. Kijelző
2. Sebesség+
3. Bekapcsolás
4. Sebesség-
5. Töltő port
6. Kapcsoló



Gömbfej: nagy izomcsoportok számára



Lapos fej: a test minden részére



Hengeres fej: a felső végtagokra



U-alakú fej: alsó végtagokra



Mély szövetek, például ízületek, tenyér és talp masszírozására



A test nagy izomcsoportjainak, például a lábak és a fenék masszírozásához

Paraméterek

Modell	BW-FAS2
Bemenet	DC18V - 1A
Töltő port	adapter
Súly	750 g
Méret	241 x 162 x 68 mm
Akkumulátor	2500 mAh
Teljesítmény	50 W

Felhasználói útmutató

A masszázs különböző részeinek igényei szerint válassza ki a masszázsfejet, és helyezze be a masszázs pisztoly elülső nyílásába. A maximális sebesség mellett 6, a minimális sebesség mellett 11 óra működés.

A fokozat beállítása: a ciklus felgyorsításához nyomja meg röviden az 1 - 20 fokozatú kapcsoló gombot.

Figyelem

Ne használja az alábbi helyzetekben: aneurizma, vérzés, vérhígítók alkalmazása, szívbetegség, terhesség, rák, ízületi panaszok.