

Soocas fogászati irrigátor W3 Pro

Használati utasítás



www.soocastech.com

Köszönjük, hogy a SOOCAS száájápolási termékcsaládot választotta.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a helyes használati módot.

Tartsa meg ezeket az utasításokat, és szkennelje be a QR-kódot az oficial SOOCAS-fiók követéséhez.

Övintézkedések

Nyilatkozatok

A termék helyes és biztonságos használata, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes megjegyzést és figyelmeztetést.

*Figyelmeztetés

1. Azoknak a személyeknek (beleértve a gyermekeket is), akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, például a fizikailag cselekvőképtelen vagy szellemi fogyatékos személyeknek, a terméket csak felügyelő felügyelete mellett szabad használniuk, tisztítaniuk és karbantartaniuk.
2. Ne töltsa a terméket nedves környezetben.
3. Ez a termék nem gyermekjáték.
4. Ne csatlakoztassa vagy vállassza le a hálózati adaptert és a töltőkábelt nedves kézzel; ellenkező esetben áramütés következhet be.
5. Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőport és a töltőkábel száraz; ellenkező esetben rövidzárlatot okozhat.
6. Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki egy speciális tápkábelrel vagy a SOOCAS gyártójától vagy javítórészlegétől vásárolt speciális cikkel.
7. Ha a felhasználó nem érti az üzemeltetési eljárásokat és a biztonsági utasításokat, ne használja a terméket a helytelen kezelésből eredő sérülések elkerülése érdekében.
8. A parodontális betegségben szenvedő vagy az elmúlt hat hónapban végzett szájsebészeti műtétet követően a terméket fogorvos felügyelete mellett kell használni.
9. Ne használja ezt a terméket a jelen használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon.
10. A leforrázás elkerülése érdekében ne öntsön 40° feletti forró vizet a víztartályba.
11. A termék kidobása előtt vegye ki az akkumulátort.
12. Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.
13. Az akkumulátort megfelelően kell megsemmisíteni.

* Tiltás

1. Kérjük, ne használja a terméket a száj tisztításán kívül más célokra.
2. Ne nyomja a hegyet erősen az ínyre vagy a fogakra, hogy elkerülje azok sérülését.
3. Ne sértse meg, ne módosítsa, ne hajlítsa, ne húzza és ne csavarja meg erőszakkal a töltőkábelt.
4. Használjon biztonságos és legális tápegységet a termék töltéséhez.
5. Használat, tisztítás és szervizelés előtt húzza ki a tápegységet és a töltőkábelt.


*Fontos

1. Ne helyezze a terméket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyre, és kerülje a közvetlen napfényt.
2. Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja tűzbe, ne melegítse fel, ne töltsse fel, ne használja, és ne hagyja magas hőmérsékleten, mert ez az akkumulátor túlmelegedését, kigyulladását vagy felrobbanását okozhatja.
3. Ne szerelje szét vagy módosítsa ezt a terméket. Ennek elmulasztása tüzet vagy személyi sérülést okozhat. Ha javításra van szükség, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

*Jegyzet

1. Ne használja a terméket, ha a fűvóka nincs felszerelve.
2. A terméket gyermekek és csecsemők számára elérhetetlen helyen kell elhelyezni. Nem szabad játékként használni.
3. Annak érdekében, hogy a termék ne boruljon fel töltés közben, a terméket töltés közben fektesse laposra.
4. Ha seb van a száján vagy a nyelvén, ne használja ezt a terméket, hogy elkerülje a felesleges károsodást. Használat előtt konzultáljon fogorvosával.
5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, akkor teljesen fel kell tölteni és tárolni kell. Ezenkívül a terméket 6 havonta egyszer teljesen fel kell tölteni.
6. Győződjön meg róla, hogy a termék a névleges feszültségnek megfelelő áramforráshoz van csatlakoztatva; ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
7. Ne ejtsen vagy helyezzen idegen tárgyakat a töltőnyílásba, ellenkező esetben áramütés vagy rövidzárlat következhet be.
8. A tápegység csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor a hálózati adaptert és ne a töltőkábelt fogja.
9. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a hálózati adaptert és a töltőkábelt; ellenkező esetben áramütés vagy tűz keletkezhet.
10. Használat után öntse ki a víztartályban maradt vizet, majd néhány másodpercre állítsa le a készüléket, hogy a víz lefolyjon, a baktériumok elszaporodásának, a furcsa szagnak és a meghibásodásnak az elkerülése érdekében.
11. A termék, a tartozékok, a felhasználói felület és a jelen kézikönyvben szereplő egyéb elemek ábrái csak referenciaként szolgáló ábrák. A termékfrissítések és frissítések miatt a tényleges termék és az ábra némileg eltérhet. A tényleges terméknek elsőbbsége van.

Termékleírás

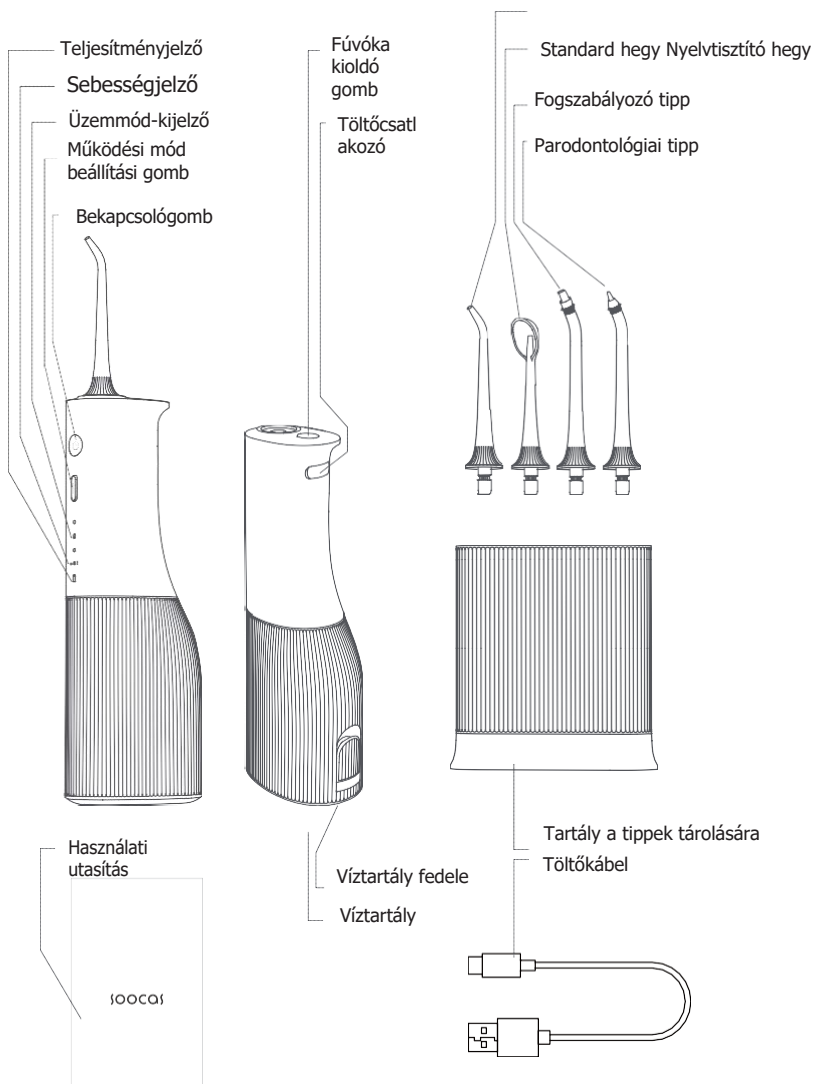

A


Betöltés

- A készüléket az első használat előtt fel kell tölteni.
- Győződjön meg róla, hogy a termék és a keze száraz, csatlakoztassa a C típusú töltőkábelt a töltőporthoz és a hálózati adapterhez (külön megvásárolható), majd kapcsolja be a készüléket.
- A töltöttségi szintjelzők leírása:

Az öntözőberendezés állapota	Töltöttségi szint állapota	Töltési szint
A munka helyzete	Folyamatosan zöldre világít	100%-30%
	Állandó piros fény	30%-10%
	Gyorsan villogó piros (nem tudja bekapcsolni a készüléket)	< 10%
Töltési állapot	Folyamatosan zöldre világít	100%
	Villogó zöld	100%-30%
	Vörös villogás	< 30%

Megjegyzés: A terméket 15°C és 35°C közötti szobahőmérsékleten kell feltölteni. Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten (15 °C alatt) töltik, az üzemidő viszonylag rövidebb lesz. Ha a hőmérséklet túl alacsony (5 °C alatt), előfordulhat, hogy a termék nem tölthető fel.

Megjegyzés: A termék töltés közbeni felborulásának megakadályozása érdekében a terméket töltés közben fektesse laposra.

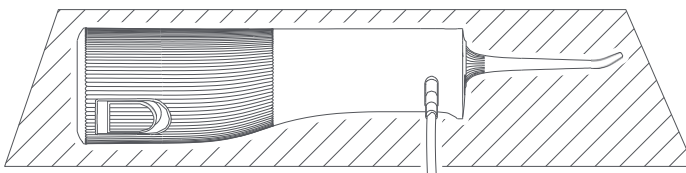


Víz hozzáadása a víztartályhoz

- Nyissa ki a víztartály fedelét. Öntse a megfelelő mennyiségű vizet a tartályba, és fedje le a tartályt a gép használatának megkezdéséhez.

Figyelem!

- Javasoljuk, hogy 40 °C alatti meleg vizet vagy csapvizet használjon.
- Ne adjon a termékhez vegyi anyagokat, például fogkrémet, sót vagy más szilárd szájöblítő tablettát. Ellenkező esetben a termék eltömődik vagy megsérül.

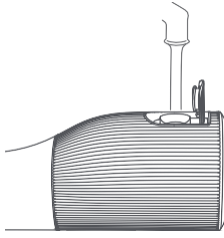

Irrigátor tippek

Standard: hatékonyan távolítja el az ételmaradékot, a fogkövet és a lepedéket a fogak között, valamint a fognyílásokban és a fogrésekben, és megakadályozza a szuvasodást és a fogkő kialakulását.

A nyelv tisztítására: hatékonyan eltávolítja a lepedéket a nyelvről, és megakadályozza a baktériumok bejutását a szervezetbe.

Fogszabályozó: megtörli és megtisztítja a nehezen hozzáférhető területeket, például fogszabályzó viselése esetén.

Parodontális: hatékonyan távolítja el a baktériumokat a fogínytasakokból, masszírozza az ínyt és megelőzi a gyulladást és az ínyvisszahúzódást.



Szabványos
hegy



Nyelvtisztító
tipp



Fogszabályo-
zási tipp




Parodontológiai tipp

A csúcs felszerelése és eltávolítása

- Helyezze be a hegyet a fúvóka rögzítőfuratába, amíg "kattanást" nem hall.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hegykioldó gombot, majd húzza felfelé az eltávolításhoz.

Megjegyzés: Ne nyomja meg a hegy kioldó gombját használat közben, hogy elkerülje a hegy kilövéséből eredő véletlen sérüléseket.

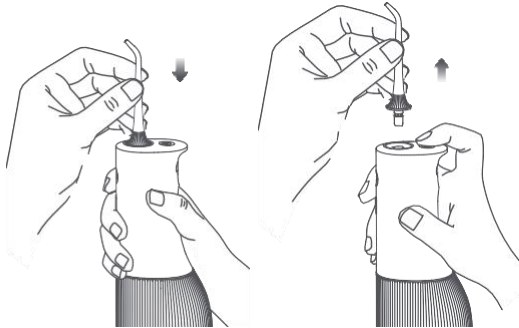


Be-/kikapcsolás

- Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék be-/kikapcsolásához.
- Ezt a terméket úgy tervezték, hogy 2 perces időzítő mechanizmust működtessen. A termék 2 perc használat után automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához nyomja meg a bekapcsológombot.
- A víztartály szabványos kapacitása körülbelül 240 ml. A használati idő a tisztítási módtól függően változik.

Tippek: A baktériumok elszaporodásának elkerülése érdekében minden használat után öntse ki a készülékben, a víztartályban és a fúvókában maradt vizet.

Üzem módok váltása

A tisztítási módok közötti váltáshoz nyomja meg az üzemmódváltó gombot.

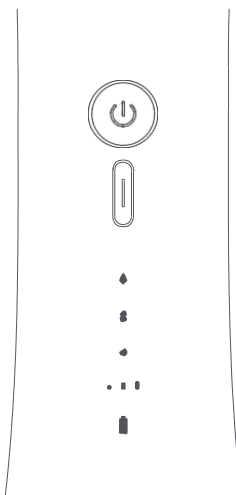

● Normál üzemmód: Normál víznyomás, hatékony tisztítás, napi fogtisztításra alkalmas.

● Ínyápoló üzemmód: Változó víznyomású impulzus, amely alkalmas az íny masszírozására és a fogak erősítésére.

● Helyszíni permetezési mód: pontról pontra történő permetezés, különösen hasznos a fogszabályozó felhasználók számára.

- Kikapcsolt állapotban az üzemmódbeállító gomb megnyomásakor a termék egymás után vált a normál üzemmód, a rágógumi-ápolási üzemmód és a permetezési üzemmód között.

- Bekapcsolt állapotban az üzemmódvezérlő gomb megnyomásakor a termék a lágy, közepes és erős fokozat között vált.

Megjegyzés: A sebességfokozatot nem lehet változtatni pontpermetezési üzemmódban.

Tipp: Ez a termék rendelkezik egy memória üzemmóddal, amely lehetővé teszi, hogy a rendszer alapértelmezés szerint abba az üzemmódba lépjen, amelyben utoljára kikapcsolták.

Felhasználói kézikönyv

- Tartsa függőlegesen az irrigátort, tolja be a fúvókát a szájába, igazítsa a fúvókát a fogak vagy az íny közötti részhez, majd kissé nyissa ki a száját, hogy a víz a tisztítás után egyenletesen kifolyhasson.

- Tisztítsa meg a fogakat sorban, a fúvókát lassan mozgatva a fogak mentén.

- Igazítsa a fúvókát az íny vonalához, és tartsa merőlegesen az ínyre.

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a periodontális zsebekbe. Ellenkező esetben vérzik az íny.

- Ne nyomja a fúvókát erősen a fogaira vagy az ínyére. Ellenkező esetben a termék normál üzemmódban eltömődés elleni védelemre kapcsolhat, és átmenetileg leállhat, amely során a három üzemmódjelző 10 másodpercig villogni fog. Ha a kijelzők kikapcsolnak, a normál működés visszaállítása érdekében újra bekapcsolhatja a terméket.




Figyelem!

- Előfordulhat, hogy a termék fő testében (víztartály, vízfelvevő cső stb.) desztillált vizet használnak a teljesítményvizsgálathoz, ami normális. Kérjük, használja nyugodtan.
- A termék első használatakor irritációt vagy vérzést érezhet, még akkor is, ha ínye egészséges. Ez azért van, mert az íny nem szokott hozzá ehhez a fajta irritációhoz. Az ilyen tünetek általában 1-2 héten belül megszűnnek.
- Az új felhasználóknak ajánlott egy hétig a fogínyápoló üzemmódot használni, majd a termékhez való hozzászokás után a többi üzemmódot.
- Ha 2 hétnél hosszabb ideig rosszul érzi magát, hagyja abba a használatát, és forduljon fogorvosához.

Karbantartás és tisztítás


- A napi használat után nyissa ki a víztartály fedelét, és öntse ki a maradék vizet.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. Várja meg, amíg a gép automatikusan kiüríti a tartályban lévő vizet. Nyomja meg a bekapcsológombot a gép kikapcsolásához. Ezután helyezze vissza a víztartály fedelét.
- Vegye ki a fúvókát, és tegye a fúvókátartályba.

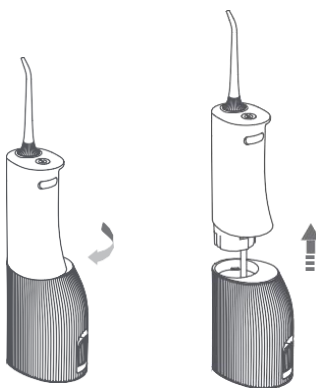

Tippek:

Ha a fúvókát és a víztartályt meg kell tisztítani, vegye ki őket, és tisztítsa meg tiszta vízzel. A víztartály belsejében lévő vízkő kefével tisztítható. Tisztítás után törölje át a víztartályt egy ruhával. A termék felületének tisztításakor vízzel vagy semleges tisztítószerrel átitatott nedves ruhával tisztítsa meg. A termék tisztításához ne használjon 40 °C feletti hőmérsékletű folyadékokat, maró folyadékokat, hígítókat vagy alkoholt.

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg a terméket, és száradás után tárolja.

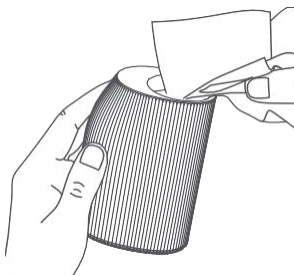

A víztartály karbantartása

Öntsön legfeljebb 40 °C-os meleg vizet a víztartályba, majd adjon hozzá egy evőkanál fehér ecetet. Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a víztartály üres. Kapcsolja ki az adagolót. Töltsön tiszta, meleg vizet a tartályba, és kapcsolja be a terméket a filterezéshez.

Tippek:

A termék legjobb teljesítményének biztosítása érdekében 1-3 havonta egyszer tisztítsa és karbantartsa a víztartályt. A fúvókát 6 havonta egyszer cserélje ki. Ha a fúvókacsúcs deformálódott, cserélje ki egy újjal; ellenkező esetben meghibásodást okozhat.

Specifikáció

Termékmodell: W3 Pro

Névleges bemenet: 5V 1A

Vízálló IPX7

Töltési idő: körülbelül 4 óra

Problémamegoldás


Hiba tünete	Lehetséges okok	Megoldás
Az akkumulátor töltése közben az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője kikapcsol.	A tápegység nincs megfelelően csatlakoztatva.	Helyesen csatlakoztassa az áramforráshoz.
A töltés utáni működési idő túl rövid.	A környezeti hőmérséklet túl alacsony.	A terméket 15°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölts fel és használja beltérben.
	A töltési idő túl rövid.	Tölts fel a terméket.
	Az akkumulátor nem elegendő.	
A készülék nem képes bekapcsolni a készüléket.		
A víznyomás túl alacsony.	fűvókát szennyezés érte.	Cserélje ki a fűvókát.
	A fűvóka meghibásodott.	

Tájékoztató a környezetvédelemről


- Ha a termék elérte hasznos élettartamának végét, előfordulhat, hogy a beépített akkumulátort újrahasznosítás céljából ki kell venni, mielőtt a terméket a nemzeti vagy helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítaná. Ha az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges, küldje a terméket a hatóságok által kijelölt újrahasznosító központba vagy a SOOCAS által kijelölt helyre. A műszaki szerviz eltávolítja az akkumulátort és újrahasznosítja.

Figyelmeztetés:


- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, hogy elkerülje a robbanást vagy a mérgező vagy veszélyes anyagok felszabadulását.
 - Ne zárja rövidre az akkumulátort, nehogy az leégjen és tüzet okozzon.
 - Ne szerelje szét a terméket saját maga, mivel az előzetes szétszerelés károsíthatja a készüléket.
 - A készülékkel való munkavégzés előtt tegye meg az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
 - Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a tápegységet. Az akkumulátor eltávolítása.
-
- A víztartály eltávolítása után csavarja le az alsó fedél anyáját egy szerszámmal, majd egy Phillips csavarhúzóval távolítsa el az alsó fedél négy csavarját.
 - Távolítsa el a felső fém díszburkolatot egy szerszámmal, és csavarja ki a felső burkolaton lévő két csavart egy Phillips csavarhúzóval.

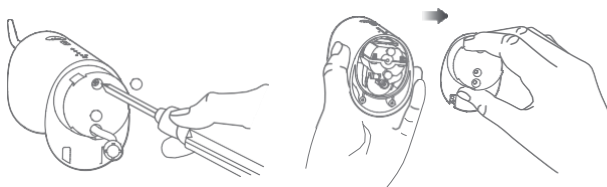

- Távolítsa el a felső fedelet és a felső fedél alatti egyéb alkatrészeket egy Phillips csavarhúzóval.

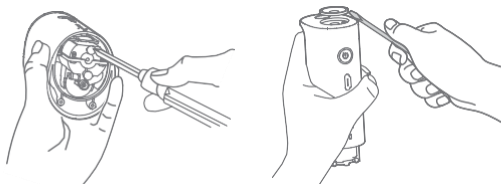

- Távolítsa el a mechanizmust, vágja el ollóval az akkumulátortól a készülék alaplapjához vezető csatlakozókábelt, majd vegye ki az akkumulátort.

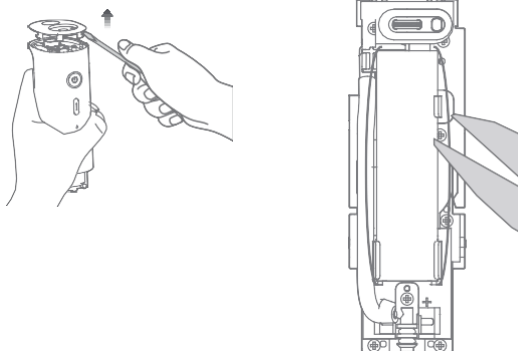

- Vegye ki az akkumulátort, és tárolja a hatóságok által kijelölt helyen.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Kérjük, forduljon az önkormányzathoz, a szállítóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, a részletesebb információkért.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek az üzembiztonsággal, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.