

ENCHEN



Mint 5

ENCHEN Elektromos Fogkefe
Használati útmutató


Termékkomponensek

Fogkefe fej


Váltó

Nyomja meg a be/ki kapcsoláshoz:
Ha a készülék be van kapcsolva,
Nyomja meg a sebességváltáshoz;
Ha a készülék ki van kapcsolva
hosszan nyomja meg 3
másodpercig a be-/kikapcsoláshoz
a menetzár

Főtest

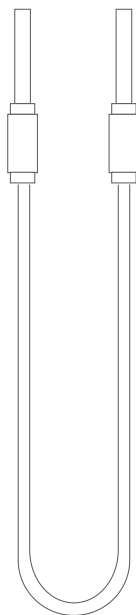

USB töltőkábel

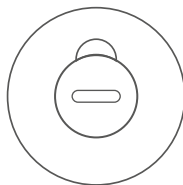

TYPE-C
Töltés
Port

A termék jellemzője

IPX7 vízálló kialakítás

Három tisztítási mód

Memorizálási funkció: a legutóbb használt felszerelés rögzítéséhez

Beépített intelligens időzítő: _ Emlékezteti Önt a fogmosás megváltoztatására. területet 30 másodpercenként.

Extra hosszú akkumulátor-üzemidő: 14 napig tart, ha naponta kétszer használja a fogkefét két percig.

Utazási zár

Termék bevezetése

Nagyon köszönjük, hogy termékeinket választotta. A fogkefével kapcsolatos kényelmesebb élmény érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Nagyon köszönjük, hogy termékeinket választotta. A fogkefével kapcsolatos kényelmesebb élmény érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Termék specifikáció

Termék neve	Elektromos fogkefe
Modell	Mint 5
Névleges teljesítmény	1.5 W
Névleges feszültség	5V --- 600 mA
Töltési idő	2 óra
Akkumulátor	3.7 V --- 600 mA



Csomagolási specifikáció

Tétel	Főtörzs	Fogkefe Fej	Töltés kable	Kézi
Mennyiség	1	1	1	1

Megjegyzés: A képek és a bemutatott termékek kapcsolódó jellemzői ebben a kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. Kérjük, olvassa el a tényleges termékekre. A vállalat fenntartja a jogot, hogy a termék specifikációinak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Három tisztítási mód

1.White Light CLEAN (Tiszta üzemmód). A fogak tisztításához alaposan és a szájüreg minden területét.

2.Blue Light Milder (érzékeny üzemmód). Ez az üzemmód a sonic fogkefe első használatához ajánlott. Ön kényelmesebbnek fogja érezni, ha fogfájása van és fogak túlérzékenysége

3.Green Light MASCARE (ínyápoló üzemmód) .Highly gyakori ritmikus rezgések eltávolíthatják a dohányfüvet, és teafoltokat. Ez az üzemmód alkalmas olyan emberek számára, akik makacs fogfoltok esetén.

Megjegyzés: Ez a gép memóriefunkcióval rendelkezik, amely automatikusan el tudja menteni az utoljára használt fogaskereket.

Óvintézkedések

Amikor a főttestet a töltőeszközhöz csatlakoztatja, kérjük, ellenőrizze, hogy a feszültséget jelző a terméken feltüntetett feszültség megegyezik a töltőberendezés feszültségével először.


Háromhavonta cserélje ki a fogkefefejet. Ha a fogkefefej valamilyen sérülés miatt elveszik, kérjük, hogy időben cserélje ki.

Bármely fizikailag, érzékelésben és szellemileg károsodott vásárlóknak (beleértve a gyermekeket is) nem ajánlott használni ezt a terméket, hacsak nem állnak felügyelet alatt. felügyelete és irányítása alatt állnak.

Ha szájon át történő kezelés alatt áll, vagy más tüneteket észlel a szájában, kérjük, forduljon fogorvosához.

mielőtt használná ezt a terméket. Ez a termék csak a következőkre használható fogtisztításra, kérjük, ne használja más célra. Ha a használata után rosszul érzi magát, és a tünet nem múlik el, vagy ha folyamatos vérzés jelentkezik, kérjük, hagyja abba a használatát, és forduljon fogorvosához.


A lépések használata

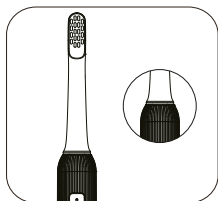

1. Óvatosan helyezze be a fogkefét fejet a kimeneti tengelybe, és rögzítse azt szükség szerint.



2. Használat előtt vegyen megfelelő mennyiségű fogkrémet a kefére fejre, áztassa be vízzel, majd tegye a fogkefét a szájba.

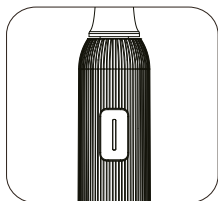

3. Kapcsolja be a kapcsolót és válassza ki a megfelelő sebességfokozatot a igényeinek megfelelően.



4. Hagyja, hogy a sörték 45 ° -ban a rágógumi vonalat, lassan mozgassa a fogkefét.



5. Tartsa a fő testet a fogkefét enyhén, és lassan mozgassa körkörös mozdulatokkal. Ne nyomja vagy súrolja túl erősen.



6. A fogmosás után öblítse le a száját és a fogkefe fejét vízzel.

Töltési utasítások

Az első használat előtt kérjük, töltsse fel a főegységet.

Alacsony töltöttségű akkumulátor: A piros jelzőfény villog. A termék közvetlenül leáll, ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.

Töltés: A fehér jelzőfény villog (egy ciklus 3 másodpercig tart),

*Töltés közben a fogkefe nem használható.

Töltési idő: körülbelül 2 óra. Teljesen feltöltve a fehér jelzőfény mindig világít.


Töltési módszer:

A fogkefe feltöltéséhez használjon 5V-os USB adaptert vagy csatlakoztathatja a számítógép USB-portjához.

Megjegyzés: A termék védelme érdekében kerülje el a következők használatát az 5 V-nál magasabb feszültségű adapterrel történő töltést. A készüléknek 5V-os adapterrel vagy a készülék USB-portján lévő USB-porttal kell tölteni. számítógépen.

Az akkumulátor eltávolítása

- 1: Húzza ki az alap vízálló gumigyűrűjét
- 2: Egy szerszámmal feszítse ki a bázis csatját a kis kerek lyukon keresztül, és távolítsa el az alsó fedelet
- 3: Egy szerszámmal nyissa ki a rögzítőkeret csatját, és vegye ki a rögzítőkeretet
- 4: Vágja le a vezető lapokat a keret mindkét végénél. az akkumulátort, vegye ki az akkumulátort, és megfelelően ártalmatlanítsa.

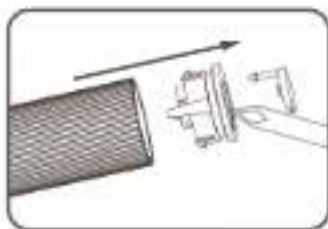

Ne zárja rövidre az akkumulátort, nehogy az akkumulátor leégjen és tüzet okozzon.

Ne dobja az akkumulátort a tűzbe, hogy elkerülje a robbanás vagy mérgező anyagok felszabadulása.

A beépített újratölthető akkumulátor tartalmazhat anyagokat amelyek szennyezik a környezetet. A készülék ártalmatlanítása előtt termék elszállítása előtt feltétlenül távolítsa el az akkumulátort, vagy küldje el a terméket egy hivatalosan kijelölt újrahasznosító állomáson történő ártalmatlanításra az akkumulátor ártalmatlanítására. A kiselejtezett termékeket elküldheti a következő címre is a vállalat által kijelölt újrahasznosító részlegnek, és a karbantartó részleg lebontja és újrahasznosítja az akkumulátort.

Hiba	Probléma	Megoldások
Csökkentett rezgés intenzitás	1.A fogkefe a fogakra kényszerül 2.A kefefej a fogkefébe nyomják túl mélyen a fődarabba	1.Óvatosan helyezze a kefefejet a fogakra 2.Vegye ki a kefefejet a fogantyúból, és helyezze a kimeneti tengelyre újra. Tartson távolságot a kefefej és a fogantyú között.
Még akkor is, ha feltöltve, a munka idő a fogkefe a nagyon rövid	1.A fő test nem függőlegesen van elhelyezve a töltőn, így nem töltődik fel. 2. Alacsony töltöttségű akkumulátor	Helyezze a fődarabot függőlegesen úgy, hogy az alja érintkezzen a töltővel, és ellenőrizze, hogy a jelzőfény világít-e.
A fogkefe nem működik	1. Töltési idő ts nem elég 2. Az akkumulátor elérte az akkumulátor az élettartama végére ért	1.Kérjük, töltse fel 2.Replace az akkumulátort a mi cégünknel

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.